

Wärme für Infusionen  
und Blutprodukte



## Das Barkey *S-line* sicher – günstig – effektiv

### Fortschrittliche Technik

- Das Barkey s-line wärmt Blutprodukte und Infusionen bis zum Patienten.
- Das elektrisch beheizte und einseitig geöffnete Wärmegerät, ist im Stande, handelsübliche Infusions- und Transfusionsbestecke aufzunehmen.
- Das Barkey s-line ist einfach und in allen medizinischen Fachabteilungen

anzuwenden. Es läßt sich wegen seiner glatten Oberflächen sehr leicht reinigen.

- Aufgrund des großen und flexiblen Einsatzbereiches bei niedrigen bis mittleren Flußraten, ergibt sich eine optimale Alternative zu kostenintensiven Blutwärmern mit Einmalartikeln.


### Vermeidung von Hypothermie

Wärme ist der Schlüssel zum Wohlbefinden Ihrer Patienten! Mit dem kostengünstigen Barkey s-line spenden Sie Wärme, die die Behandlung für alle Patienten erleichtert und den Heilungsprozess beschleunigt. Das Resultat: Das Pflegepersonal wird entlastet die Behandlungskosten werden reduziert.

## Technologie nach Maß für die Medizin

### Weitere Vorteile im Überblick

- Integrierte Temperatursensoren garantieren beste Erwärmung und höchste Sicherheit
- Komplette Ummantelung des Infusions- und Transfusionsbestecks und damit optimale Erwärmung
- Keine zusätzlichen Verbrauchsartikel
- Wärmung von Blutrückflußleitungen oder von Dialyseflüssigkeiten in Kombination mit Geräten für die Nierenersatztherapie
- Wärmung von enteraler und/oder parenteraler Ernährung
- Bediener-sicherheit durch voreingestellten Solltemperaturwert
- Anzeige des Ist-Temperaturwertes des Wärmegerätes im Display
- Erhältlich in verschiedenen Innendurchmessern
- Glatte Oberfläche, damit einfach abwaschbar und desinfizierbar
- Verwendung ausschließlich bio-kompatibler Materialien
- Optisches und akustisches Signal im Fehlerfall

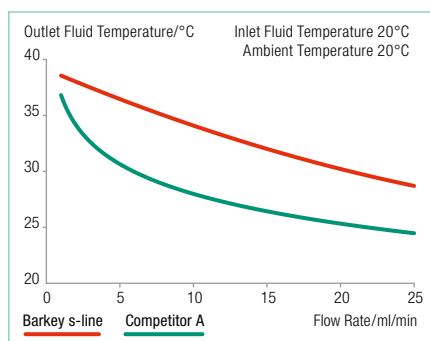

Exklusive innovative technologische Lösungen auf höchstem Qualitätsstandard und der konkrete Nutzen in der Praxis – das sind die Grundlagen für den Erfolg des ganzheitlichen Barkey Wärmekonzeptes.

Mit exklusivem Ingenieurwissen für die Medizintechnik hat sich Barkey in 30 Jahren einen guten Namen erworben. Die sprichwörtliche Qualität und die

Praxistauglichkeit der Geräte und Systeme »made in Germany« hat sich in verschiedensten Anwendungen bewährt.

Echte Innovationen und Problemlösungen, die dem Anwender einen konkreten Nutzen bringen, kann nur entwickeln, wer Augen und Ohren offen hält, mit den Fachleuten aus der Praxis spricht und deren Bedürfnisse rechtzeitig erkennt.

Daher möchten wir auch Sie zum aktiven Dialog mit uns einladen: Haben Sie Fragen zu den Geräten und Systemen des Barkey Wärmekonzeptes? Welche fachspezifischen Fragen können wir Ihnen beantworten? Welche Anregungen haben Sie für uns?

**Tel.: +49 (5202) 9801-0**

**Fax: +49 (5202) 9801-99**

**mail: [info@barkey.de](mailto:info@barkey.de)**

|  |   |
|--|---|
| Typ                                      | Barkey s-line   |
| Artikelnummer                            | 213.10285   |
| Temperatureinstellung                    | 39°C Solltemperatur werksseitig   |
| Länge Wärmeprofil                        | L: 1.500 mm   |
| lieferbare Innendurchm.                  | 4,30 mm<br>6,55 mm  |
| Passend für Infusionsleitungsdurchmesser | von 4,0 bis 7,0 mm  |
| Gewicht                                  | ca. 1.300 g   |
| Netzanschluss                            | 100-240V, 50/60Hz   |
| Leistungsaufnahme                        | 75 Watt   |
| Anschlußleitung                          | 3 m   |
| Schutzklasse                             | I Schutzerdung<br>Schutzgrad BF<br>äußere und innere Anwendung am Patienten mit isoliertem Anwendungsteil |
| Feuchtigkeitsschutz                      | IP X2   |
| Kennzeichnung                            | CE 0123   |
| Barkey ist zertifiziert                  | ISO 9001<br>ISO 13485   |
| Made in Germany                          |   |



Das dargestellte Zubehör ist nicht Bestandteil der Lieferung.

Vertrieben durch:

[www.barkey.de](http://www.barkey.de)