

Kontrollierte Wärme für Patienten und Infusionen

Controlled warmth for patients and infusions

Barkey autocontrol 3XPT



 **Barkey**

Wärme steuern und kontrollieren! Ein Steuergerät, viele Wärmegeräte, ein Ziel: Vermeidung von Hypothermie!



Wärme ist der Schlüssel zum Wohlbefinden Ihrer Patienten! Mit Geräten des Barkey Wärmekonzeptes spenden Sie Wärme, die die Behandlung für den Patienten erträglicher macht und den Heilungsprozess beschleunigt. Das Resultat: Das Pflegepersonal wird entlastet und Ihre Patienten fühlen sich wohl.

Das ganzheitliche Barkey Wärmekonzept ist die Summe unserer Erfahrungen und dem engen Kontakt zu unseren Kunden. Das Barkey Wärmekonzept basiert auf der Prämisse „wärmen und warmhalten“. Es vermeidet dabei kostenintensive Einmalartikel – zur Schonung Ihres Budgets und der Umwelt. Die intensiven Kosten sonst üblicher Einmalartikel werden bewusst gespart. Das zentrale Element der umfassenden Wärmeversorgung ist das Barkey autocontrol 3XPT – die bedienerfreundliche Temperaturregeleinheit für Wärmegeräte der Serie Barkey XPT.

Fortschrittliche Technik zur Vermeidung von Hypothermie

Das Barkey autocontrol 3XPT dient als Regleinheit für zwei Wärmegeräte zum hygienischen, patientengerechten, biologisch schonenden und sicheren Wärmen und Warmhalten von Vollblut, Erythrozyten-Konzentraten, Infusionslösungen und anderer auf + 37°C zu erwärmende Substanzen und Materialien sowie zum Wärmen von Patienten. Die intelligente Abstimmung der Wärmegeräte der Serie XPT ermöglicht es dem Anwender diese ohne vorherigen Abgleich an jedes Barkey autocontrol 3XPT anzuschließen. Das Steuergerät Barkey autocontrol 3XPT erkennt die angeschlossenen Wärmegeräte selbständig. Es kontrolliert und steuert deren Temperierung zuverlässig und effizient.

Directing and controlling warmth! One control unit, many warming devices, one aim: The well-being of your patient!

Warmth is the key to the well-being of your patients! With devices of the Barkey warming concept you give warmth which makes the treatment for the patient more bearable and accelerates the healing process. The result: The nursing staff will be relieved and your patients feel good

The comprehensive Barkey warming concept is the sum of our experiences and the close contact to our customers.

The Barkey warming concept is based on the premise "warming and keeping warm".

It incorporates a conscious decision against the use of cost-intensive disposable accessories – both in the interest of your budgets and the environment. There are no additional costs for disposable articles.


The Barkey autocontrol 3XPT represents the focal element of this comprehensive supply of warmth – the user-friendly unit for controlling the temperature of the warming devices of the series Barkey XPT.

Advanced technology for avoidance of hypothermia

The Barkey autocontrol 3XPT is a control unit for two warming devices for hygienic, patient-friendly, biological gentle and safe warming and keeping warm of whole blood, erythrocyte-concentrates, infusion solutions and other substances and materials which have to be warmed to +37°C as well as for the warming of patients. The intelligent modulation of the warming devices of the series XPT enables the user to connect them on every Barkey autocontrol 3XPT without the need for prior aligning. The control unit Barkey autocontrol 3XPT recognises the connected warming devices automatically. It directs and controls the relevant warming procedure reliably and efficiently.

Infusionsflasche
Infusion bottle


warming center

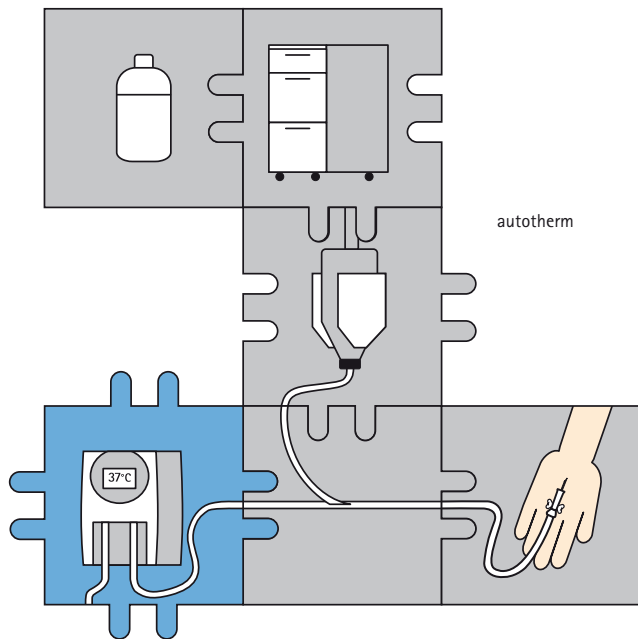

autocontrol

autoline

Infusionsnadel
Infusion needle

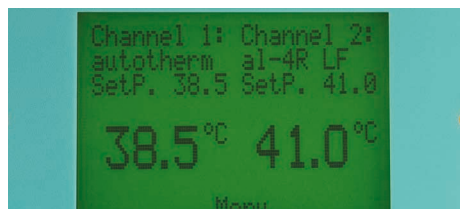

Einfache Bedienung

Das übersichtliche Display mit Klartextanzeige macht die Bedienung erstaunlich einfach. Die Temperatureinstellungen lassen sich präzise vornehmen. Die Texte werden in Landessprache angezeigt.

Simple operation

The clear display with easy-to-follow messages makes operation amazingly simple. The temperature settings can be adjusted with precision. The texts are displayed in the national language.

Einfache Montage

Das Barkey autocontrol 3XPT ist nicht nur in seiner Funktion, sondern auch in seiner Anbringung äußerst flexibel. Durch die drehbare Stativ- und Normschienenbefestigung ist das Gerät einsetzbar, wo immer Sie es benötigen.



Simple assembly

The Barkey autocontrol 3XPT is not only very flexible in its function but also in its mounting.


The turnable stand and standard rail fixing allow the device to be located wherever you want.

Weitere Vorteile im Überblick:

- Integrierter Tragegriff
- Kompatibel mit allen Wärmegeräten der Serie Barkey XPT
- Sprachwahl der Landessprache
- Übersichtliches Display mit Klartextanzeige
- Anzeige der angeschlossenen Wärmegeräte individuell je Kanal
- Dauerhafte Anzeige der Soll- und Ist-Temperaturwerte der angeschlossenen Wärmegeräte
- Bediensicherheit durch voreingestellte Maximalwerte der Wärmegeräte
- Kombinierte Stativ- und Normschienenbefestigung
- Integrierter Selbsttest
- Optisches und akustisches Alarmsignal im Fehlerfall

Further advantages in brief:

- Integrated transport handle
- Compatible with all warming devices of the series Barkey XPT
- Language choice of national language
- Clear display with easy-to-follow messages
- Display of the connected warming devices individual per channel
- Permanent display of the pre-set and actual temperature values of the connected warming devices
- User safety through preset maximum values of the warming devices
- Combined stand and standard rail mounting
- Integrated self-test
- Optical and acoustic alarm signal in case of fault

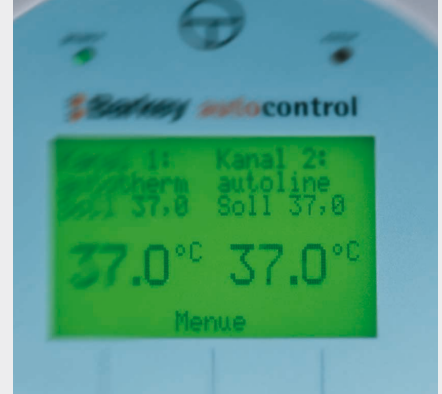

Barkey autocontrol 3XPT

Technische Daten

Außenmaße:	B x H x T: 140 x 210 x 130 mm
Gewicht:	ca. 3,7 kg
eingestellte Temperatur:	abhängig vom angeschlossenen Wärmegerät
Netzanschluss:	115 Volt/230 Volt
Leistungsaufnahme:	200 Watt
Stromaufnahme:	ca. 1 A/230 Volt ca. 2 A/115 Volt
Ausgänge:	für 2 Wärmegeräte 24 V DC/max. 65 W
MDD-Klassifizierung:	II b
Kennzeichnung:	CE 0123
Lagerung/Transport:	-10 °C bis + 70 °C
Barkey ist zertifiziert:	DIN EN ISO 9001 DIN EN ISO 13485

Made in Germany

Wärmegeräte zum Wärmen von Infusionen

Barkey autotherm XPT
Barkey autoline XPT

Wärmegeräte zum Wärmen von Patienten

Barkey paddytherm XPT
Barkey thermcare plus XPT

Technical Data

Overall dimension:	W x H x D: 140 x 210 x 130 mm
Weight:	approx. 3,7 kg
Set temperature:	dependent on the connected warming device
Mains supply:	115 Volt / 230 Volt
Power consumption:	200 Watt
Current consumption:	approx. 1 A / 230 Volt approx. 2 A / 115 Volt
Ports:	for 2 warming devices 24 V DC / max. 65 W
MDD classification:	II b
Certification:	CE 0123
Storage/Transport:	-10 °C to + 70 °C
Barkey is certified:	DIN EN ISO 9001 DIN EN ISO 13485

Made in Germany

Warming devices for the warming of infusions

Barkey autotherm XPT
Barkey autoline XPT

Warming devices for the warming of patients

Barkey paddytherm XPT
Barkey thermcare plus XPT

Technologie nach Maß für die Medizin



Mit exklusivem Ingenieurwissen für die Medizintechnik hat sich Barkey in mehr als 25 Jahren einen guten Namen erworben.

Die sprichwörtliche Qualität und die Praxistauglichkeit der Geräte und Systeme „made in Germany“ hat sich in verschiedensten Anwendungen bewährt. Innovation verbunden mit Präzision – auf diese Kurzformel lassen sich die technologischen Lösungen aus dem Hause Barkey bringen. Getreu dem Anspruch : „Barkey – die lösen das!“

Echte Innovationen und Problemlösungen, die dem Anwender einen konkreten Nutzen bringen, kann nur entwickeln, wer Augen

und Ohren offenhält, mit den Fachleuten aus der Praxis spricht und deren Bedürfnisse rechtzeitig erkennt.

Daher möchten wir auch Sie zum aktiven Dialog mit uns einladen:

Haben Sie Fragen zum Barkey autocontrol 3XPT oder zu den weiteren Geräten und Systemen des Barkey Wärmekonzeptes? Welche fachspezifischen Fragen können wir Ihnen beantworten? Welche Anregungen haben Sie für uns? Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Tel.: +49 (5202) 9801-0
Fax: +49 (5202) 9801-99
mail: info@barkey.de

Barkey GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 8
33818 Leopoldshöhe
Germany

Tel. +49 (5202) 9801-0
Fax +49 (5202) 9801-99
info@barkey.de

www.barkey.de

Custom-made medical technology

Barkey has earned its excellent reputation over the last 25 years through its exclusive engineering knowledge in the field of medical technology. The proverbial quality and the actual benefits in practical situations of the devices and systems „made in Germany“ have proved themselves again and again in the most varied areas of application. Innovation in conjunction with precision – this is the formula that can be used for all technological solutions that emerge from the

Barkey company. In keeping with the adage: „Barkey – they solve it!“

Real innovations and problem solutions which provide the user with real advantages can only be developed by those who keep their eyes and ears open, who talk with the specialists on the ground and recognise their needs in good time.

This is why we would like to ask you to contact us: Do you

have any questions concerning Barkey autocontrol 3XPT or any other devices or systems of the Barkey warming concept? Which specialist questions may we answer for you? Do you have any comments you would like to make to us?

We are looking forward to your telephone call.

Tel.: +49 (5202) 9801-0
Fax: +49 (5202) 9801-99
mail: info@barkey.de

Vertrieben durch:
Distributed by: